


# Orteza przedramienia, dłoni i kciuka/niedowład

---

## WSKAZANIE

Stabilizacja lub unieruchomienie nadgarstka, dłoni, palców długich i kciuka po urazach (np. skręceniu), zabieg operacyjny i stabilizacja gipsem. Leczenie zachowawcze w zapaleniu ścięgien, stanach zapalnych i chorobach zwyrodnieniowych nadgarstka, dłoni, palców długich i kciuka, nawet w formie szyny spoczynkowej. Faza rehabilitacji po operacji ręki. Zalecany dla pacjentów z niedowładem nadgarstka, długimi palcami i kciukami.




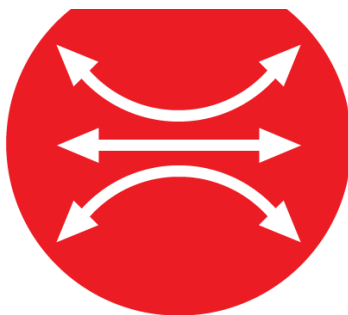

ELASTYCZNY



ŚWIATŁO

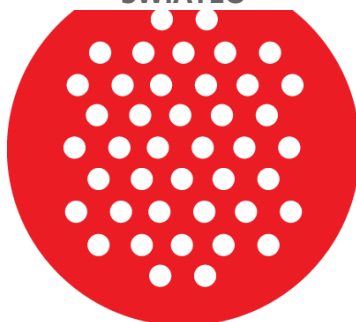

PERFOROWANY



PRZEZROCZYSTY






ZMYWALNY

## Aplikacja i regulacja

Gotowe do regulacji ortezy Chrisofix® należy dopasować bezpośrednio do kontuzjowanej / chorej części ciała. Zgrubną regulację (zginanie) należy wykonać na nieuszkodzonej kończynie o podobnej wielkości. Dokładne regulacje i korekty (np. po zmniejszeniu obrzęku tkanek miękkich) można wykonać bez zdejmowania ortezy.

- Dopasuj ortezę do dłoni, nadgarstka i przedramienia.
- Ustaw nadgarstek w wymaganej pozycji.
- Włóż ramię stroną dłoniową do wcześniej uformowanej ortezy.
- Dopasuj ortezę poprzez delikatny nacisk na dłoń i przedramię.
- Wymień pręt usztywniający.
- Załóż bandaże na palce, dłoń i przedramię.

Aby zdjąć ortezę, nie trzeba odpinać paska z tyłu dłoni ; dłoń można po prostu wyciągnąć, a następnie ponownie wsunąć w uchwyt. Częste zginanie i rozciąganie ortezy może zaburzyć jej stabilność; należy je ograniczyć do niezbędnego minimum.

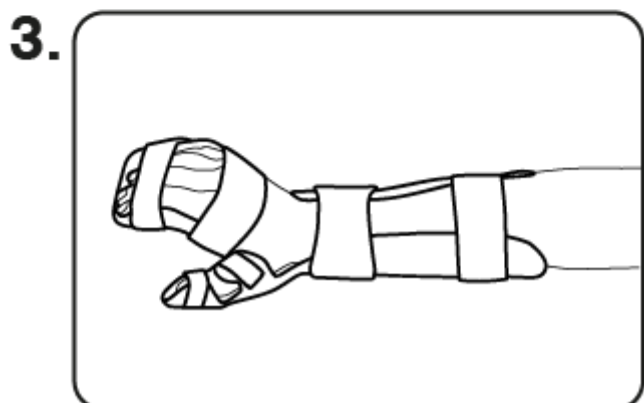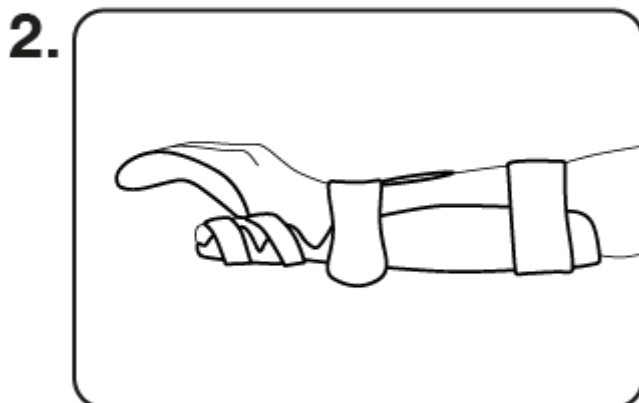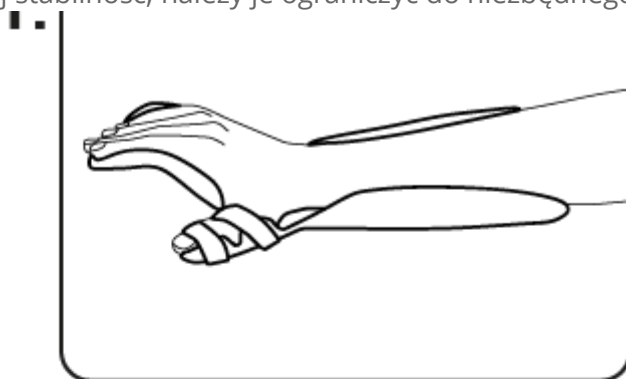

# Szczegóły produktu

## PREMIUM FORTE (Z WKŁADKA)

### XS (bardzo mały)

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni  
< 6 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 733 111 179  
Lewy: 743 111 179

---

### S (mały)

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni  
6-8 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 734 111 179  
Lewy: 744 111 179

---

### M (średni)

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni  
8-9 cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 736 111 179  
Lewy: 746 111 179

---

### L (duży)

---

**Pomiar**

Szerokość dłoni  
9 < cm

---

**Numer REF / zamówienia**

Po prawej: 738 111 179  
Lewy: 748 111 179

